



**AMBULANT  
CLINICAL  
SOLUTIONS**

**PRODUKTKATALOG 2023**

# Modulare Wasseraufbereitungsanlage

## Vom Komponentenlieferanten hin zu Wasserexperten in 15 Jahren

Von Beginn an, seit ich 2008 die Geschäftsführung bei der Gebr. Heyl Vertriebsgesellschaft übernommen habe, war meine Vision ein hochkompetenter und professioneller Partner in allen Prozesswasserthemen zu sein. Eine Auswirkung dieser Vision ist der konsequente Ausbau unseres Produktportfolios, das nicht nur Produkte und Komponenten beinhaltet, sondern auch Lösungen und Anlagentechnik zur Prozesswasserbereitstellung in höchster Qualität.


Mit dieser ersten Wasseraufbereitungsanlage für den Sterilisationsprozess in ambulanten Kliniken haben wir ein Anlagenkonzept entwickelt, das dem Stand des Wissens und der Technik entspricht. Unsere Experten haben ein modulares System entwickelt, das jedem Anspruch ambulanter OPs und Kliniken

**Prinzip** Die Modulare Wasseraufbereitungsanlage wurde speziell für den ambulanten Versorgungsbereich entwickelt. Unter Beibehaltung der Gesamtgeometrie kann die Anlage auf die unterschiedlichen Wasserhärtegrade in Deutschland, die Bedarfsmengen in unterschiedlichen ambulanten Zentren, als auch die Ausgangswasserqualität inklusive etwaiger Aufbereitungsschritte seitens der Versorger zum Beispiel durch den Einsatz des Aktivkohlefilters angepasst werden. Die Modularität bietet den entscheidenden Vorteil, dass das Gesamtkonzept auf den jeweiligen Wassertyp beziehungsweise die Zusammensetzung, als auch die Aufbereitungsverfahren des Versorgers angepasst werden können.

**Anwendung** Die modulare Anlage ist für den Einsatz in ambulanten Zentren/Kliniken konzipiert und lässt sich aufgrund ihrer platzsparenden und individuellen modularen Bauweise in das bestehende Klinikkonzept integrieren.

## Besonderheiten

- Dauerhafte Leitwert- und Silikat-Überwachung mittels Testomat®808 SiO<sub>2</sub>
- integrierte Notversorgung bei Störung der Enthärtungs- oder der Umkehrosmoseanlage
- Abwasser-Abführung über Sole-Hebeanlage

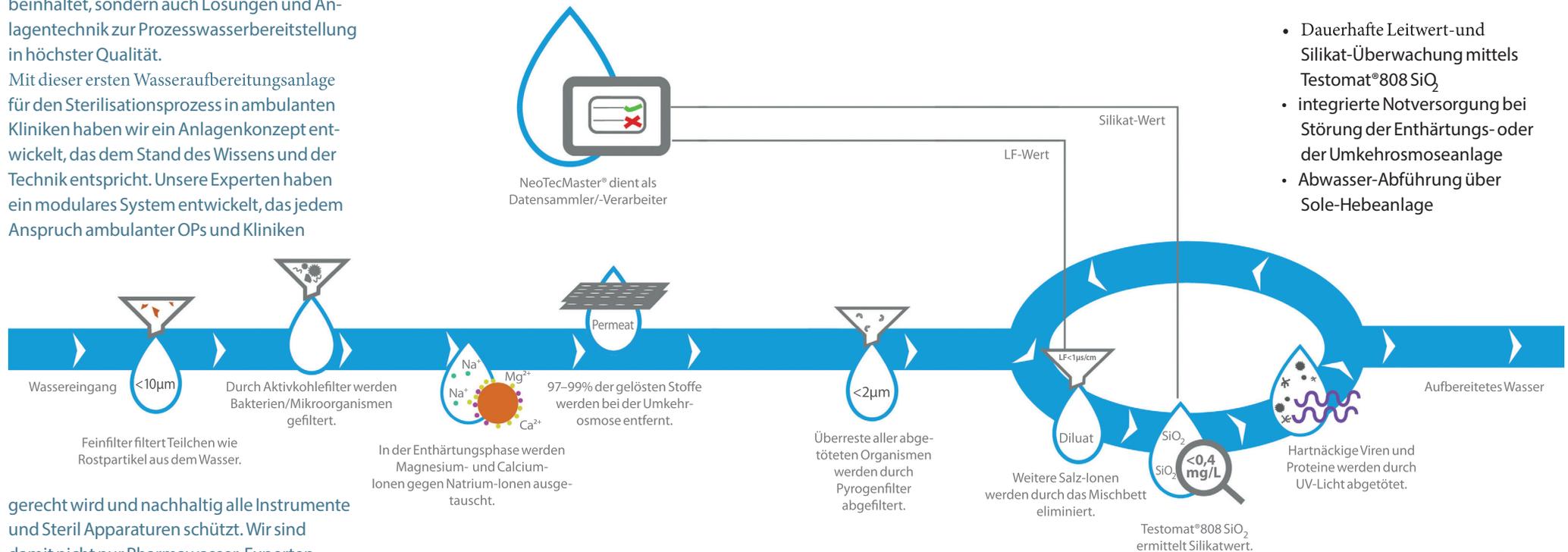

gerecht wird und nachhaltig alle Instrumente und Steril Apparaturen schützt. Wir sind damit nicht nur Pharmawasser-Experten, sondern seit 2017 ebenfalls mit unserem Know-How und unserer Expertise im medizinischen sowie klinischen Prozesswasser für Steril Prozesse an Ihrer Seite.

Konfigurieren Sie Ihre Wunschanlage in unserem Onlineshop unter [www.wasseraufbereitung-ambulante-kliniken.de](http://www.wasseraufbereitung-ambulante-kliniken.de)

## Optionen

- UV-Desinfektion Mini
- Pyrogenfilter
- Hebeanlage
- NeoTecMaster® 5 Zoll mit Gehäuse
- Sichtfenster
- Beleuchtung
- Aqua-Stop (Abspernung via Magnetventil)
- Auffangwanne

*M. Osterwald*  
M. Osterwald, Geschäftsführer



Oder lassen Sie sich gerne persönlich von unserer Abteilung Solution Building beraten unter +49(0)5121-7609-75

Gebrüder Heyl Vertriebsgesellschaft  
für innovative Wasseraufbereitung mbH

Max-Planck-Str. 16, D-31135 Hildesheim  
Postfach 100518, D-31105 Hildesheim

T +49 (0) 51 21 7609-0  
F +49 (0) 51 21 7609-44

eMail: [vertrieb@heylnemeris.de](mailto:vertrieb@heylnemeris.de)  
[www.heylnemeris.com](http://www.heylnemeris.com)

